

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRZYKAWEK I IGIEŁ

TELINJECT VARIO

Ostrzeżenie:

Firma TELINJECT GMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania. Wymagania przepisów prawnych dotyczące broni, ochrony zwierząt oraz przepisy dotyczące lekarstw muszą zostać spełnione, a ponadto należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa przewidzianych przez firmy farmaceutyczne.

Kontrola działania powinna zostać wykonana przed praktycznym zastosowaniem, a napełnianie strzykawki powinno być ćwiczone w regularnych odstępach czasu, aby zagwarantować w ten sposób szybkie, bezpieczne i precyzyjne stosowanie w praktyce.

Akcesoria do napełniania strzykawki TELINJECT VARIO



TELINJECT - szpila odpowietrzająca (EST)



TELINJECT - złącze strzykawkowe (EKUP)



TELINJECT - strzykawka powietrza (LSP20)



TELINJECT - strzykawka napełniana lekarstwem (MSP3)

TELINJECT - igła medyczna (MK)




TELINJECT - nasadka zabezpieczająca (SCH30V)




TELINJECT - olej silikonowy (SO)

Konstrukcja strzykawk TELINJECT VARIO

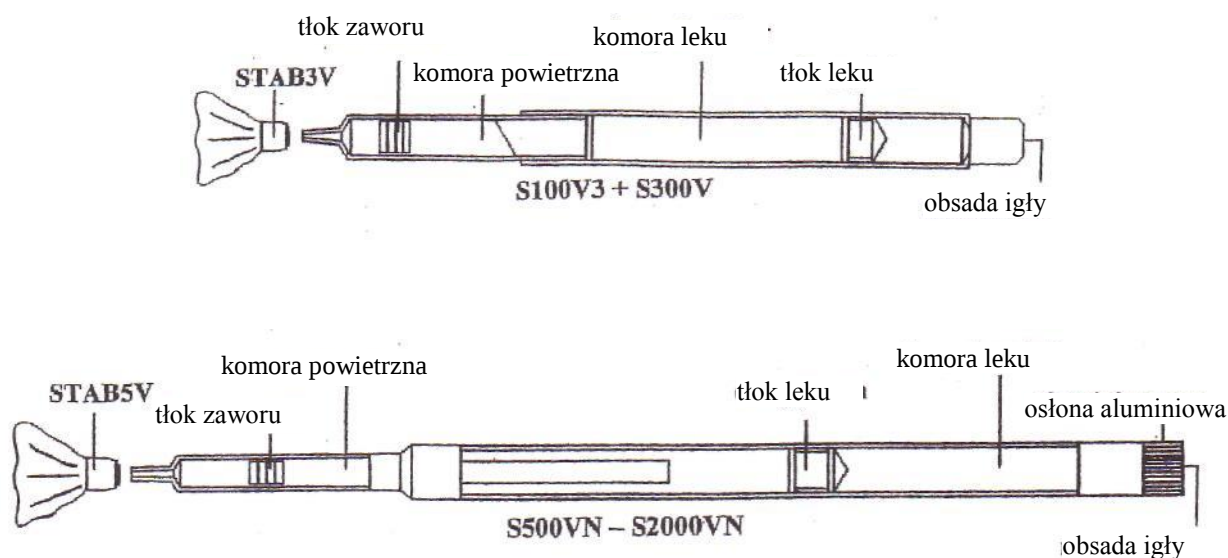

Napełnianie strzykawki TELINJECT VARIO:

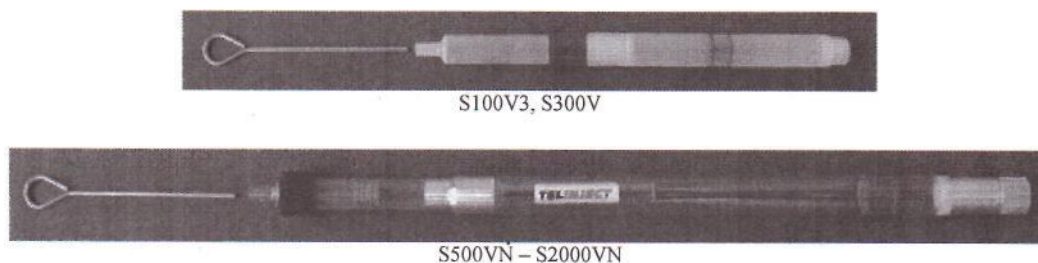

Zdemontować stabilizator lotu. Jeżeli jest to konieczne, odpowietrzyć strzykawkę, a tłok zaworu (niebieski tłok) komory powietrznej musi być ruchomy.

Podłączyć strzykawkę powietrza do cylindra strzykawki za pomocą elementu łączącego.

Aluminiową nasadkę należy usunąć ze wszystkich strzykawk VARIO o wysokiej pojemności (od 5 ml do 20 ml objętości).

Przesunąć tłok leków poprzez wtłoczenie powietrza.



S100V3 / S300V



S500VN - S2000VN



K1538V

Przygotowanie igły:

Przesunąć element zamykający / blokujący nad otwór boczny igły specjalnej. Otwór musi być całkowicie

zamknięty.

Element zamykający może być użyty tylko raz z powodu utraty gęstości i należy sprawdzać, czy nie został uszkodzony przed rozpoczęciem użytkowania.

Jak napełnić substancją czynną (lekiem):





S100V3 / S300V



S500VN - S2000VN

Należy wykorzystać strzykawkę jednorazowego użytku do napełnienia komory leków strzykawki TELINJECT VARIO. W celu zachowania właściwości balistycznych strzykawki należy całkowicie napełnić strzykawkę. Jeżeli to konieczne, dodać roztwór chlorku sodu lub wodę destylowaną. Pozostające pęcherzyki powietrza nie stanowią zagrożenia dla zwierzęcia i nie wpływają na działanie strzykawki. **Stożek (konus) strzykawki musi być suchy i wolny od zanieczyszczenia smarem/tłuszczem.**

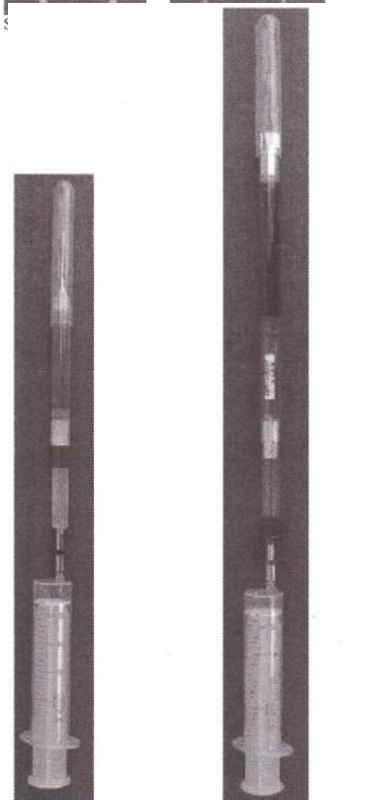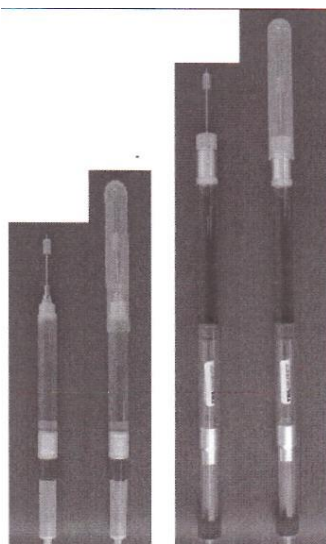

S100V3 / S300V

S500VN – S2000VN

W jaki sposób należy nakładać igłę:

Nałożyć jednym pewnym ruchem obrotowym zamkniętą specjalną igłę na stożek strzykawki (możliwie z użyciem zacisku/szczypiec).

W przypadku strzykawk o dużej objętości należy dokręcić aluminiową nasadkę z powrotem na miejsce zajmowane wcześniej przez igłę.

Założyć nasadkę zabezpieczającą na igłę i docisnąć ją mocno na stożek strzykawki. Nasadka zabezpieczająca strzykawki ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i zapobiega wypłynięciu leku, jeżeli wystąpi defekt szczelności.

Przed zastosowaniem wprowadzić około 20 ml **(w S500VN-S2000VN 30ml)** do napełnionej strzykawki TELINJECT VARIO przy pomocy strzykawki powietrza, aby wytworzyć ciśnienie.

Działa to tylko wtedy, jeżeli strzykawka jest trzymana z komorą leku skierowaną do góry.

Podłączyć strzykawkę powietrza do komory powietrznej (ruchomy tłok) za pomocą elementu łączącego i zdecydowanie wtłoczyć powietrze (20ml) **(w S500VN- S2000VN 30ml)** do komory powietrznej, wyjąć strzykawkę powietrza podczas naciskania.

Przegląd stanu:


Lekko postukać w strzykawkę. Tłok zaworu
musi mocno przylegać do komory
powietrznej i musi być nieruchomy.



S100V3 / S300V



S500VN – S2000VN

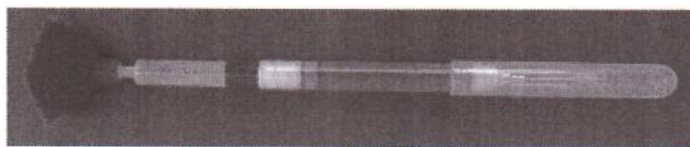

S100V3 / S300V



S500VN - S2000VN

Wykonując ruch obrotowy solidnie osadzić stabilizator lotu na tłoku zaworu.

Strzykawka jest gotowa do użycia i można ją teraz przenosić w bezpieczny sposób.

Przed użyciem należy zdjąć nasadkę zabezpieczającą. Teraz należy umieścić strzykawkę TELINJECT VARIO w karabinku/pistolectic i wykonać strzał.

W przypadku, jeżeli napelniona strzykawka TELINJECT VARIO nie zostanie użyta, możliwe jest rozładowanie strzykawki w następujący sposób:



S100V3, S300V



S500VN - S2000VN

Zdemontować stabilizator lotu. Usunąć powietrze ze strzykawki za pomocą szpili odpowietrzającej (tłok zaworu musi być ruchomy).



S100V3 / S300V



S500VN - S2000VN

Odpowietrzoną strzykawkę należy przechowywać z igłą skierowaną do góry, po zdjęciu nasadki zabezpieczającej i blokującego elementu.

Zapewnić pojemnik na lek.



S100V3 / S300V



S500VN - S2000VN

Podłączyć strzykawkę powietrza za pomocą elementu łączącego do komory powietrznej strzykawki podającej lek.

Można teraz usunąć lek ze strzykawki TELINJECT VARIO, poprzez naciskanie strzykawki powietrza i napełnienie w ten sposób pojemnika na lek.

Uwaga:

W przypadku konieczności dodania roztworu chlorku sodu do leku, stężenie leku ulega zmianie. Dlatego użytkownik powinien oznaczyć taki lek etykietą i przechowywać osobno.

Oczyszczanie strzykawek i igieł TELINJECT:

Po użyciu strzykawki należy wyjąć igłę ze strzykawki za pomocą zacisku/szczypiec.

Wyjąć i wyrzucić element zamykający.

Pozostawić igłę pod działaniem bieżącej wody, aby pozbyć się w ten sposób pozostałości leku i krwi.

Naciągnąć pewną ilość wody za pomocą strzykawki jednorazowego użytku, podłączyć do niej igłę i nacisnąć tłok strzykawki, aby woda wypłynęła przez igłę.

Następnie, należy użyć strzykawki powietrza przedmuchiwać igłę, aby uniemożliwić pozostałościom wody zaklejenie igły i umożliwić zachowanie przelotu w igle.

Na koniec, igłę można umieścić w miejscu przechowywania.

Wtłoczyć powietrze do komory powietrznej strzykawki TELINJECT za pomocą strzykawki powietrza, aby wytworzyć ciśnienie w strzykawce podającej lek.

Podłączyć element łączący do strzykawki jednorazowego użytku, napęlnić ją wodą i wprowadzić do komory leku.

Wtłoczyć wodę do komory leku i ponownie ją usunąć.

Powtarzać tę czynność, aż wszystkie pozostałości leku zostaną usunięte.

Usunąć powietrze ze strzykawki TELINJECT za pomocą szpili odpowietrzającej tak, aby tłok zaworu komory powietrznej stał się ruchomy. Założyć stabilizator i umieścić strzykawkę w miejscu przechowywania.

Uwaga!

W komorze powietrznej nie może znajdować się jakiegokolwiek płynu.

Komora powietrzna musi być zawsze sucha.

Utrzymanie strzykawek TELINJECT:

Dzięki stosowaniu prawidłowej konserwacji i oczyszczenia, strzykawek TELINJECT można używać wielokrotnie. Aby polepszyć lub utrzymać zdolność ślizgową tłoka tłoczącego lek, zaleca się stosowanie oleju silikonowego podczas czyszczenia.

Wycofać tłok strzykawki leku za pomocą strzykawki powietrza i dołączonego elementu łączącego do środkowego położenia.

Ostrożnie zakropić 1-2 krople oleju silikonowego (nie należy używać jakiegokolwiek innego oleju!) do komory leku i stale rozprowadzać olej poprzez obracanie strzykawką TELINJECT.

Najlepsze wyniki można osiągnąć, jeżeli umożliwi się olejowi silikonowemu oddziaływanie przez całą noc.

Uwaga: Obsada igły musi pozostawać wolna od zanieczyszczenia tłuszczem!

Zawsze należy przechowywać strzykawki TELINJECT w stanie niewypelnionym, przy zerowym ciśnieniu i z założonym stabilizatorem lotu, w normalnej temperaturze pokojowej. Strzykawki TELINJECT wykonane są z trwałego tworzywa sztucznego i mogą być używane przez okres 3 lat.